
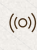







MICRONEEDLE FACE ROLLER | 9 IN 1


 Skin Scan & Personal Routine Guide


 SmartSonic Pulsation Technology


 Red Light Active Regeneration Technology


 DeepDerma Skin Renewal & Firming Technology

 Cell Stimulation System

 Impurities Prevention Technology

 Fine Lines Refinement Technology

 Energizing Cooling Technology

 Detox Rose Quartz Spa Session


Accesorii
Incluse
**Rose Quartz
MicroNeedle
Cooling**



Create your personal Skincare Routine
and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com

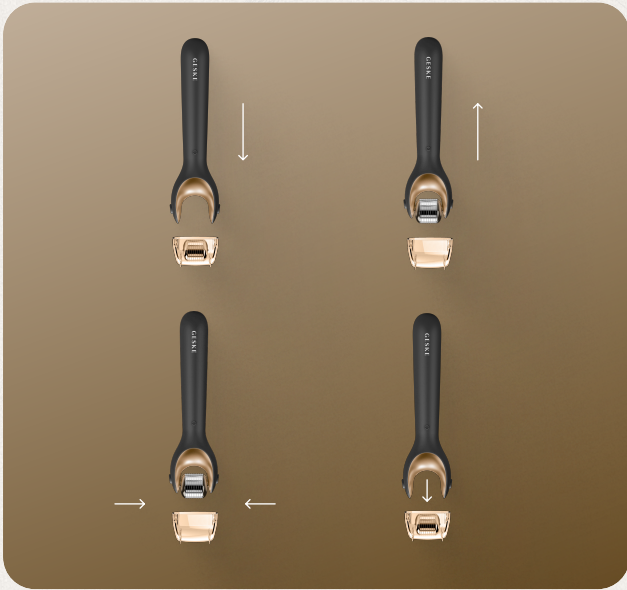

PRIMII PAȘI

PASUL 01

Utilizați suportul nostru special furnizat pentru a atășa rola MicroNeedle pe dispozitivul dvs. Asigurați-vă că nu atingeți direct acele. Atașamentul include 540 de ace de 0,3 mm.

PASUL 02

Puneți rola de răcire la frigider pentru câteva ore înainte de a o folosi. Apoi, atășați-o pe dispozitiv pentru a începe sesiunea.

PASUL 03

După ce ați terminat sesiunea, pulverizați rola cu un spray cu alcool, în timp ce o rotiți pentru a vă asigura că toate zonele sunt acoperite. Lăsați-o să se usuce. Apoi, așezați capacul pe dispozitiv.



Accesoriu MicroNeedle

Reînnoirea pielii DeepDerma



Pulsații sonice


Calmează și relaxează



Pornit/Oprit

Apăsăți timp de 1-2 secunde

Timp de încărcare 2,5 ore

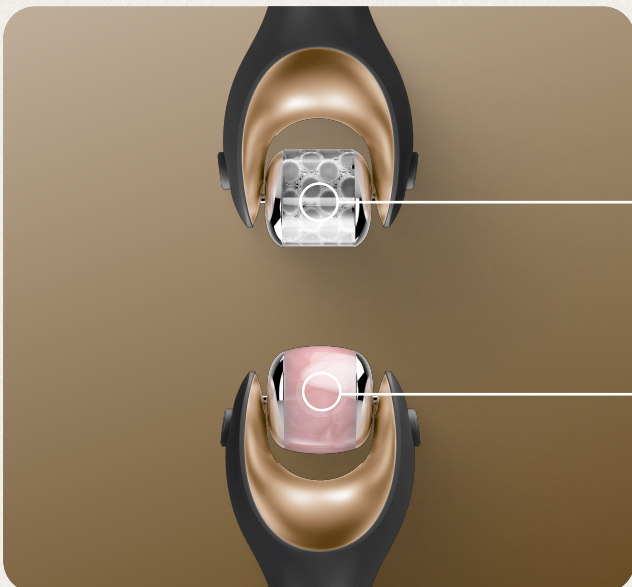

Accesoriu de răcire

Reîmprospătează și revigorează



Accesoriu din cuarț roz

Strălucire și detoxifiere

STĂPÂNIȚI PRIMII PAȘI

Stimulează-ți pielea cu dispozitivul nostru MicroNeedle Face & Body Roller SmartAppGuided™ | 9 în 1. Acest dispozitiv inovator de înfrumusețare vine cu un dispozitiv MicroNeedle, un accesoriu de răcire și un accesoriu din cuarț roz.



MICRONEEDLING FACIAL ENERGIZANT

PREGĂTIRE

Începeți cu tenul curat, fără machiaj. Montați accesoriul MicroNeedle pe dispozitiv.

PORNIRE

Activați SmartSonic Pulsation Technology ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde.

ROLA

Împărțind fața în patru cadrane, rulați pe fiecare secțiune câte 15 secunde. Lucrați în linii verticale, orizontale și diagonale. Apoi, rulați pe gât și decolteu timp de 60 de secunde fiecare.

FINALIZARE

Opriți dispozitivul ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde și aplicați un ser GESKE pe față și pe gât. Igienizați rola și curățați-vă dispozitivul cu un detergent pentru dispozitive GESKE după fiecare utilizare.



DETOX ROSE QUARTZ SPA SESSION

PREGĂTIRE

Începe cu tenul curat, fără machiaj. Montează rola cu cuarț pe dispozitiv.

PORNIRE

Activați SmartSonic Pulsation Technology ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde.

ROLA

Rotiți cu mișcări verticale pe bărbie și pe linia maxilarului. Sprijiniți dispozitivul de față și rulați-l ușor pe zonele din jurul și între ochi între 15 și 30 de secunde. În cele din urmă, așezați dispozitivul pe frunte și rulați-l în mișcări verticale până la linia părului.

FINALIZARE

Opriți dispozitivul ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde. Igienizați rola și curățați-vă dispozitivul cu un detergent pentru dispozitive GESKE după fiecare utilizare.

Create your personal Skincare Routine

and Download our GESKE App



Aplicație avansată



Ghidare video



Scanarea pielii cu IA



Sfaturi de la experți



Ghid personal



Recompense în aplicație



INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ. CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE.

Citiți informațiile de siguranță înainte de prima utilizare. Păstrați ambele instrucțiuni de utilizare.

Produsul dvs. dintr-o privire

Produsul dvs. este o rolă dermatologică multifuncțională cu micro-ace. Este sigur să fie utilizat de până la 2 ori pe săptămână, de maximum 3 ori pe săptămână. Vă rugăm să nu îl utilizați mai frecvent. Această limitare se aplică doar pentru cea mai intensă funcție a dispozitivului: microneedling. Pentru siguranță maximă și rezultate ideale, urmați întotdeauna rutina dvs. personalizată de skincare, creată prin intermediul aplicației GESKE.

Note privind utilizarea

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, aceste informații de siguranță și Ghidul rapid de pornire trebuie citite în întregime. Ambele instrucțiuni trebuie păstrate, deoarece conțin informații importante privind utilizarea în siguranță, precum și despre cerințele tehnice și legale. Dispozitivul este un produs de skincare pentru adulți, nu un dispozitiv medical sau un produs cu proprietăți medicale sau alte proprietăți vindecătoare. Utilizarea prevăzută include, de asemenea, respectarea Ghidului rapid de pornire, avertismentele enumerate aici și recomandările de aplicare personalizate de la GE. Dispozitivul este reîncărcabil și permite operarea comodă și fără fir. Trebuie să fie încărcat complet înainte de prima utilizare. Aveți nevoie doar de cablul de încărcare USB inclus. Încărcarea inițială poate dura până la opt ore. Cablul trebuie să fie conectat cu ambele contacte magnetice la punctele de contact metalice desemnate ale dispozitivului. Dacă cablul de încărcare nu se atașează singur, conectați-l la priză și așteptați. Acest lucru reactivează efectul magnetic și contactele se conectează automat. Asigurați-vă că contactele magnetice se conectează numai la punctele de contact ale dispozitivului și nu la alte suprafețe metalice.

Specificații

Materiale: silicon, ABS, PC, oțel inoxidabil | **Temperatura de depozitare:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Baterie:** Li-Ion 3.7V | **Capacitatea bateriei:** 140 mAh | **Curent maxim de încărcare:** 140 mA | **Tensiune de încărcare:** 5V | **Timp de încărcare:** aprox. 2.5 ore | **Timpul de funcționare diferă în funcție de tehnologiile și intensitățile activate.** | **Interfață:** USB | **Programe:** Vibrație: 1 treaptă de viteză, tehnologie de iluminat cu LED: 1 culoare

Produsul nu este potrivit pentru utilizarea în următoarele condiții:

În cazul în care suferiți de cancer de piele sau în stadii precanceroase (keratoză actinică) și în cazul în care suferiți de boli hemoragice (tulburări congenitale de coagulare a sângelui) și/sau luați medicamente care afectează coagularea sângelui, după un tratament cu laser sau peeling chimic și după o intervenție chirurgicală facială, indicat atât cosmetic, cât și medical. Siguranța și eficacitatea produsului nu au fost niciodată evaluate împreună cu produse și măști de îngrijire a pielii non-GESKE. Vă recomandăm să utilizați produsul numai cu produsele GESKE. Utilizați cu alte produse pe propriul risc. După tratament cu laser sau peeling chimic. După operații estetice faciale.

În următoarele cazuri, este necesară o consultare cu un medic pentru a stabili dacă produsul este potrivit pentru utilizare:

În cazul în care aveți o boală de inimă, în caz de sarcină, sau dacă faceți tratamente tip filler sau injecții dermice. Siguranța utilizării în timpul sarcinii nu a fost stabilită.

Informații suplimentare despre utilizare:

Aplicați o presiune ușoară numai atunci când utilizați capul de microneedling. Utilizarea unui dispozitiv cu micro-ace (microneedling) poate avea drept rezultat o ușoară inflamare a pielii sau vântăți. Hidratați-vă bine după fiecare ședință. Evitați exercițiile fizice, înotul și expunerea la soare timp de 24 de ore după efectuarea unei sesiuni de microneedling. Dacă nu puteți evita expunerea la soare, aplicați o protecție solară cu SPF ridicat. A nu se aplica machiaj timp de 24 de ore. Evitați utilizarea produselor ce conțin acizi și parfumuri, precum și exfolierea fizică și produsele exfoliante în timpul și după o ședință de microneedling. Utilizarea produselor cu ingrediente active precum vitamina C sau retinolul poate duce la o iritare mai intensă a pielii. Dacă această iritație persistă o perioadă mai lungă de timp, solicitați sfatul medicului. Dezinfecțaiți accesoriul cu ace după fiecare utilizare folosind un spray cu alcool și lăsați-l să se usuce la aer. Nu utilizați produsul pe pielea iritată sau vântătată sau pe răni deschise (după orice fel de leziune), în cazul infecțiilor bacteriene sau virale ale pielii (atât în zona de utilizare, cât și în alte zone). Nu utilizați produsul pe nevi, alunițe sau alte leziuni (benigne) ale pielii. Acest produs nu este destinat să trateze boli sau afecțiuni medicale ale pielii. Dacă suferiți de afecțiuni medicale sau boli de piele, consultați medicul dermatolog înainte de a utiliza acest produs. Nu utilizați produsul dacă este 1) neobișnuit de cald, 2) deteriorat sau deformat mecanic, 3) decolorat. Dacă apare durere și/sau disconfort în timpul utilizării, întrerupeți utilizarea și solicitați sfatul medicului. Produsul poate emite lumină intensă, evitați aplicarea lui în direcția sau în apropierea unui ochi deschis. Zona ochilor este foarte sensibilă: Fiți deosebit de atenți în această zonă și evitați orice contact al produsului cu pleoapele sau cu ochiul înșuși. Utilizați produsul numai așa cum este recomandat în rutina dvs. personalizată. Din motive de igienă, vă recomandăm să nu împărtășiți produsul cu nimeni altcineva. Produsul este destinat utilizării cosmetice pe față și părți ale corpului, așa cum este recomandat în aplicația GESKE Beauty. GESKE nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele dăunătoare care decurg din utilizarea pe alte zone ale corpului sau alte utilizări neorespunzătoare, conectarea la surse de tensiune neorespunzătoare, lichide conductoare contaminate sau bile. Asigurați-vă întotdeauna că ștecherul și priza sunt complet uscate înainte de încărcare. În caz contrar, se pot produce șocuri electrice, un scurtcircuit sau un incendiu. Produsul nu trebuie utilizat în timp ce este conectat la priză.

Avertizări

Pericol de rănire dacă este utilizat incorect!

Utilizați produsul numai așa cum este descris în Ghidul de pornire rapidă și în instrucțiunile video. Dacă mai aveți întrebări, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți la support@geske.com.

Pericol de rănire din cauza flăcărilor/aprinderii!

Nu stingeți produsul cu apă. Nu aruncați produsul în foc.

Risc de rănire din cauza bateriilor defecte!

Manipularea neorespunzătoare a bateriilor poate provoca o reacție exotermă necontrolată. În acest caz, aruncați întregul produs imediat și în mod corespunzător.

Pericol de rănire a copiilor!

Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

Pericol de rănire prin electrocutare!

Lichidul poate deteriora circuitul de încărcare și vă poate pune în pericol sănătatea. Deconectați produsul de la cablul/circuitul de încărcare în timpul curățării.

Pericol de deteriorare din cauza câmpurilor magnetice!

Câmpurile magnetice pot afecta componentele mecanice și electronice, cum ar fi, de exemplu, stimulatoarele cardiace. Nu utilizați produsul direct peste un stimulator cardiac. Contactați medicul curant pentru mai multe informații. Nu așezați carduri cu benzi magnetice (de exemplu, carduri de credit) în apropierea produsului, deoarece magnetii produsului le pot deteriora.

Risc de deteriorare din cauza schimbării temperaturii ambientale!

Modificarea temperaturii ambientale (de exemplu, după transport) poate duce la formarea condensului. În acest caz, nu utilizați produsul până când nu s-a adaptat la noua temperatură ambientală. Nu expuneți niciodată produsul la lumina directă a soarelui, la căldură extremă sau la apă clocotită.

Utilizare în siguranță până la o temperatură ambientală de 50 °C/122 °F.

Risc de deteriorare din cauza încălzirii prea lungi!

Deconectați cablul de încărcare de la circuit după fiecare proces de încărcare.

Încărcare sigură până la o temperatură ambientală de 45 °C/113 °F.

Informații despre eliminarea dispozitivului și DEEE. Acest aparat electric a fost lansat pentru prima dată după 13 august 2005. În conformitate cu Directiva europeană DEEE și cu reglementările naționale, aparatele electrice și piesele electronice incluse în această livrare nu trebuie eliminate prin gunoii menajer. La sfârșitul duratei de viață a produsului, acestea trebuie aruncate la un punct de colectare municipal pentru a asigura o eliminare ecologică.

Observații privind bateriile / bateriile reîncărcabile

Utilizare în siguranță până la o temperatură ambientală de 50 °C/122 °F.

Risc de deteriorare din cauza încălzirii prea lungi!

Deconectați cablul de încărcare de la circuit după fiecare proces de încărcare.

Încărcare sigură până la o temperatură ambientală de 45 °C/113 °F.



Informații despre eliminarea dispozitivului și DEEE. Acest aparat electric a fost lansat pentru prima dată după 13 august 2005. În conformitate cu Directiva europeană DEEE și cu reglementările naționale, aparatele electrice și piesele electronice incluse în această livrare nu trebuie eliminate prin gunoii menajer. La sfârșitul duratei de viață a produsului, acestea trebuie aruncate la un punct de colectare municipal pentru a asigura o eliminare ecologică.

Observații privind bateriile / bateriile reîncărcabile

În contextul distribuției bateriilor și bateriilor reîncărcabile, în conformitate cu reglementările europene, suntem obligați să vă informăm pe dvs., consumatorul, despre următoarele: Sunteți obligat legal să returnați bateriile și bateriile reîncărcabile. După utilizare, le puteți returna la noi, le puteți duce la un punct de colectare municipal sau le puteți livra gratuit unui dealer local. Bateriile și bateriile reîncărcabile sunt etichetate după cum urmează:



Aceste simboluri înseamnă că bateriile și bateriile reîncărcabile nu pot fi aruncate de dvs., consumatorul, prin gunoii menajer. Bateriile și bateriile reîncărcabile care conțin substanțe nocive sunt etichetate cu unul dintre aceste simboluri. Simbolul constă dintr-un coș cu roți tăiat și simbolul chimic al metalului greu care constituie principalul poluant. În detaliu, simbolurile menționate mai sus înseamnă:

Observații privind bateriile cu litium/bateriile reîncărcabile

Puteți recunoaște bateriile cu litium și bateriile reîncărcabile cu litium prin simbolul chimic Li*. Pe lângă informațiile furnizate mai sus, dorim să subliniem și următoarele: Când aruncați bateriile cu litium sau bateriile reîncărcabile, fie returnându-le la noi, ducându-le la un punct de colectare municipal sau prindându-le consumanților locali sau companiilor publice de eliminare a deșeurilor, vă rugăm să vă asigurați că acestea sunt complet descărcate. De asemenea, vă rugăm să acoperiți suprafețele de contact de pe baterie marcate cu „+” și „-” cu bandă adezivă pentru a evita riscul de incendiu.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin declară prin prezenta că toate dispozitivele electronice sunt conforme cu condițiile relevante ale Directivelor europene aplicabile 2014/30/UE și 2011/65/UE.

Limitarea răspunderii

GESKE Beauty Tech GmbH și/sau comercianții cu amănuntul ai acestora sunt răspunzători pentru daunele cauzate de comportamentul intenționat sau din neglijență gravă al GESKE Beauty Tech GmbH, al unui reprezentant sau al unui agent indirect, în conformitate cu directivele legale. Cu excepția vătămării vieții, a integrității corporale sau a sănătății, precum și a încălcării obligațiilor contractuale esențiale (obligații cardinale), GESKE Beauty Tech GmbH și/sau comercianții cu amănuntul sunt răspunzători numai pentru daunele care pot fi atribuite unui comportament intenționat sau din neglijență gravă. Acest lucru se aplică și daunelor indirecte, în special profiturilor pierdute. În plus, răspunderea față de consumatorii datorată unei garanții asumate, cu excepția cazului de comportament intenționat sau de neglijență gravă, sau în cazul în care există o vătămare a vieții, a integrității corporale sau a sănătății și o încălcare a obligațiilor contractuale esențiale (obligații cardinale) este limitată la daunele tipice, previzibile la încheierea contractului, precum și la nivelul daunelor medii tipice pentru acest contract. Acest lucru se aplică și daunelor indirecte, în special profiturilor pierdute. În ceea ce privește companiile, cu excepția cazurilor de punere în pericol a vieții, a integrității corporale și a sănătății sau a unui comportament intenționat sau din neglijență gravă din partea GESKE Beauty Tech GmbH și/sau a comercianților săi, răspunderea este limitată la daunele tipice, prevăzute la momentul încheierii contractului și, de asemenea, la nivelul daunelor medii tipice ale acestui contract. Acest lucru se aplică și daunelor indirecte, în special profiturilor pierdute. Nu va fi atribuită nicio răspundere pentru daunele cauzate de: Nerespectarea prezentului manual/Utilizarea neorespunzătoare/Modificări neautorizate/Modificări tehnice/Utilizarea de piese de schimb neaprobate/Utilizarea de accesorii neaprobate. Revendicările privind obligațiile de răspundere în temeiul legislației germane privind răspunderea pentru produse rămân neafectate.