



MICROCURRENT FACE-LIFTER | 6 IN 1



Skin Scan & Personal Routine Guide



SmartSonic Pulsation Technology



MicroCurrent Face-Lift Technology



Anti Aging Massage Technology



Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres



Low-Voltage Current

Instant
Lifting facial



Create your personal Skincare Routine

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com




BINE DE ȘTIUT


SFATUL 01 Asigurați-vă că dispozitivul este uscat înainte de a porni MicroCurrent Face-Lift Technology.

SFATUL 02 Pentru cele mai bune rezultate și funcționalitate optimă, asigurați-vă că utilizați gelul nostru hidratant special conceput MicroCurrent. Este obligatoriu să utilizați gelul cu toate dispozitivele noastre cu microcurent.

SFATUL 03 Curăța dispozitivul cu un detergent pentru dispozitive GESKE după fiecare utilizare.

-  **Pulsații SmartSonic**
Ridică și revigorează
-  **Microcurent**
5 intensități
-  **Pornit/Oprit**
Apasă timp de 1-2 secunde

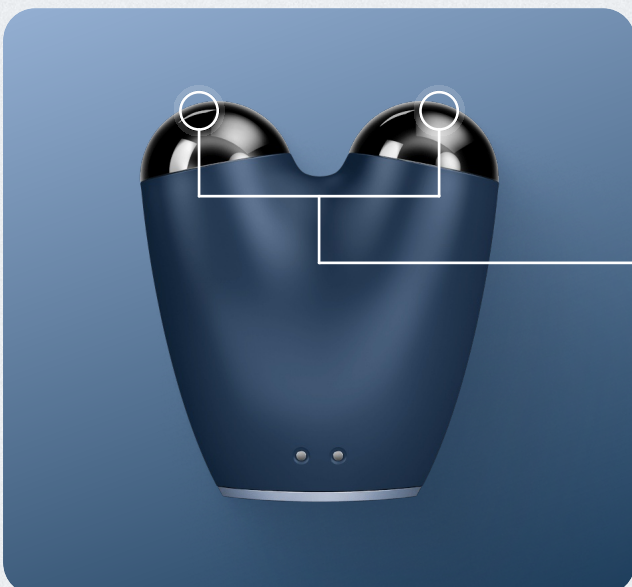

-  **Conturează și oferă fermitate**
Piele tonifiată
-  **Masaj anti-îmbătrânire**
Strălucire tinerească

STĂPÂNEȘTE PRIMII PAȘI

SmartAppGuided™ MicroCurrent Face-Lifter | 6 în 1 folosește Tehnologiile de pulsație MicroCurrent și SmartSonic pentru a vă tonifica și ridica pielea, oferindu-i un aspect tineresc și o strălucire sănătoasă.



LIFTING COMPLET AL FEȚEI ȘI GÂTULUI

PREGĂTIRE

Asigurați-vă că fața este curată și fără machiaj. Aplicați gelul nostru hidratant special conceput MicroCurrent.

PORNIRE

Porniți SmartSonic Pulsation Technology și MicroCurrent Face Lift Technology ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde. Selectați intensitatea dorită folosind butoanele „Plus” și „Minus”.

RIDICĂ

Începând de la bărbie, glisați dispozitivul de-a lungul maxilarului, nasului, șanțurilor nazolabiale, obrajilor și în sus pe gât, repetând fiecare mișcare de mai multe ori pe ambele părți ale feței și gâtului.

FINALIZARE

Oprți dispozitivul ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde și clățiți-l cu apă pentru a-l curăța. Curățați dispozitivul cu un detergent pentru dispozitive GESKE după fiecare utilizare.



PUNCTE ȚINTĂ

MAXILAR

Începând de la bărbie, întoarceți dispozitivul lateral și glisați ușor înspre exterior de-a lungul maxilarului. Apoi, mutați dispozitivul la șanțul nazolabial și glisați-l în sus și înspre ureche.

ȘANȚURI NAZOLABIALE

Ținând dispozitivul orizontal, efectuați o mișcare de rotire de la șanțurile nazolabiale, spre exterior, de-a lungul pomeților și apoi spre tâmples.

FRUNTE

Începând de la tâmplă glisați dispozitivul ascendent spre linia părului. Repetați această mișcare pentru a acoperi întreaga frunte.

GÂT

Începând de la baza gâtului, de la umăr, glisați dispozitivul ascendent pe partea laterală a gâtului până la linia maxilarului. Nu mutați dispozitivul în cealaltă parte laterală a gâtului. Apoi, repetați această mișcare de alunecare, dar de data aceasta treceți pe lângă maxilar până la pomeți.

Creați-vă rutina personalizată de îngrijire a tenului

și Descărcați aplicația noastră GESKE



Aplicație avansată



Ghidare video



Scanarea pielii cu IA



Sfaturi de la experți



Ghid personal



Recompense în aplicație



INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ. CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE.

Citiți informațiile de siguranță înainte de prima utilizare. Păstrați ambele instrucțiuni de utilizare.

Produsul dvs. dintr-o privire

Produsul dvs. este un dispozitiv MicroCurrent multifuncțional. Este sigur pentru a fi utilizat de până la 3 ori pe săptămână, dar nu mai mult de o dată pe zi. Vă rugăm să nu îl utilizați mai frecvent. Pentru siguranță maximă și rezultate ideale, urmați întotdeauna rutina dvs. personalizată de skincare, creată prin intermediul aplicației GESKE.

Utilizarea prevăzută

Dispozitivul Geske MicroCurrent Face-Lift este destinat stimulării gâtului și tenului și este indicat pentru utilizare fără prescripție medicală.

OBSERVAȚII PRIVIND UTILIZAREA

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, aceste Informații de siguranță și Ghidul rapid de pornire trebuie citite în întregime. Ambele instrucțiuni trebuie păstrate, deoarece conțin informații importante privind utilizarea în siguranță, precum și despre cerințele tehnice și legale. Dispozitivul este un produs de skincare pentru adulți, nu un dispozitiv medical sau un produs cu proprietăți medicale sau alte proprietăți vindecătoare. Utilizarea prevăzută include, de asemenea, respectarea Ghidului rapid de pornire, avertismentele enumerate aici și recomandările de aplicare personalizate de la GE. Dispozitivul este reîncărcabil și permite operarea comodă și fără fir. Trebuie să fie încărcat complet înainte de prima utilizare. Aveți nevoie doar de cablul de încărcare USB inclus. Încărcarea inițială poate dura până la opt ore. Cablul trebuie să fie conectat cu ambele contacte magnetice la punctele de contact metalice desemnate ale dispozitivului. Dacă cablul de încărcare nu se atașează singur, conectați-l la priză și așteptați. Acest lucru reactivează efectul magnetic și contactele se conectează automat. Asigurați-vă că contactele magnetice se conectează numai la punctele de contact ale dispozitivului și nu la alte suprafețe metalice.

Specificații

Materiale: ABS, silicon, aliaj de zinc | Temperatura de depozitare: -5 - +60 °C/23-140 °F | Baterie: Li-Ion 3.7V | Capacitatea bateriei: 380 mAh | Curent maxim de încărcare: 350 mA | Tensiune de încărcare: 5V | Timp de încărcare: aprox. 2.5 ore | Timpul de funcționare diferă în funcție de tehnologiile și intensitățile activate. | Interfață: USB | Programe: Vibrație: 1 intensitate, microcurrent: 5 intensități

Produsul nu este potrivit pentru utilizarea în următoarele condiții:

Nu utilizați dacă se știe că sunteți hipersensibil la căldură (de exemplu, urticarie termică) Dacă apare o senzație de căldură (excesivă) în timpul tratamentului, acesta trebuie întrerupt imediat

În următoarele cazuri, este necesară o consultare cu un medic pentru a stabili dacă produsul este potrivit pentru utilizare:

Dacă suferiți de o boală cardiacă și în caz de sarcină. Siguranța utilizării în timpul sarcinii nu a fost stabilită.

Informații suplimentare despre utilizare:

Înainte de a utiliza Microcurrent Face-Lift Technology, produsul trebuie să fie complet uscat. Utilizați Microcurrent Face-Lift Technology numai în combinație cu gelul hidratant MicroCurrent GESKE. Nu folosiți funcția Microcurrent în zona pieptului, în jurul ochilor, pe linia mediană a gâtului, în zona genitală/înghinală sau pe pielea roșie și inflamată, peste semne din naștere și vase de sânge umflate. Nu se cunosc informații despre efectele pe termen lung ale Microcurrentului. Ca urmare a stimulării nervului optic, se poate percepe o lumină intermitentă în timpul utilizării. Dacă acest lucru persistă atunci când nu utilizați produsul, consultați un medic. În timpul utilizării poate apărea o ușoară senzație de furnicături. Diminuați intensitatea Microcurrentului pentru a reduce sau elimina furnicăturile. Este posibil ca dispozitivele electronice de monitorizare să nu funcționeze corespunzător în timp utilizării dispozitivului. Nu folosiți niciodată produsul în timp ce conduceți sau folosiți utilaje grele. Nu inserați niciun obiect ascuțit în orificiile produsului. Produsul poate fi utilizat numai cu un adaptor de tensiune foarte joasă de siguranță (SELV). Recomandăm utilizarea surselor de alimentare standard IEC60335 pentru a încărca dispozitivul. Nu utilizați produsul pe pielea iritată sau vătămată sau pe răni deschise (după orice fel de leziune). În cazul infecțiilor bacteriene sau virale ale pielii (atât în zona de utilizare, cât și în alte zone). Acest produs nu este destinat să trateze boli sau afecțiuni medicale ale pielii. Dacă aveți afecțiuni medicale ale pielii sau boli, consultați medicul dermatolog înainte de a utiliza acest produs. Nu utilizați produsul dacă este 1) neobișnuit de cald, 2) deteriorat sau deformat mecanic, 3) decolorat. Dacă apare durere și/sau disconfort în timpul utilizării, întrerupeți utilizarea și solicitați sfatul medicului. Zona ochilor este foarte sensibilă: Fiți deosebit de atenți în această zonă și evitați orice contact al produsului cu pleoapele sau cu ochii însuși. Utilizați produsul numai așa cum este recomandat în rutina dvs. personalizată. Din motive de igienă, vă recomandăm să nu împărtășiți produsul cu nimeni altcineva. Produsul este destinat utilizării cosmetice pe față, gât și decolteu. GESKE nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele dăunătoare care decurg din utilizarea pe alte zone ale corpului sau alte utilizări necorespunzătoare, conectarea la surse de tensiune necorespunzătoare, lichide conducătoare contaminate sau bile. Asigurați-vă întotdeauna că ștecherul și priza sunt complet uscate înainte de încărcare. În caz contrar, se pot produce șocuri electrice, un scurtcircuit sau un incendiu. Produsul nu trebuie utilizat în timp ce este conectat la priză.

Avertizări

Pericol de rănire dacă este utilizat incorect!

Utilizați produsul numai așa cum este descris în Ghidul de pornire rapidă și în instrucțiunile video. Dacă mai aveți întrebări, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți la support@geske.com.

Pericol de rănire din cauza flăcărilor/aprinderii!

Nu stingeți produsul cu apă. Nu aruncați produsul în foc.

Risc de rănire din cauza bateriilor defecte!

Manipularea necorespunzătoare a bateriilor poate provoca o reacție exotermă necontrolată. În acest caz, aruncați întregul produs imediat și în mod corespunzător.

Pericol de rănire a copiilor!

Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

Pericol de rănire prin electrocutare!

Lichidul poate deteriora circuitul de încărcare și vă poate pune în pericol sănătatea. Deconectați produsul de la cablul/circuitul de încărcare în timpul curățării.

Pericol de deteriorare din cauza câmpurilor magnetice!

Câmpurile magnetice pot afecta componentele mecanice și electronice, cum ar fi, de exemplu, stimulatoarele cardiace. Nu utilizați produsul direct peste un stimulator cardiac. Contactați medicul curant pentru mai multe informații. Nu așezați carduri cu benzi magnetice (de exemplu, carduri de credit) în apropierea produsului, deoarece magnetii produsului le pot deteriora.

Risc de deteriorare din cauza schimbării temperaturii ambientale!

Modificarea temperaturii ambientale (de exemplu, după transport) poate duce la formarea condensului. În acest caz, nu utilizați produsul până când nu s-a adaptat la noua temperatură ambientală. Nu expuneți niciodată produsul la lumina directă a soarelui, la căldură extremă sau la apă clodită.

Utilizare în siguranță până la o temperatură ambientală de 50 °C/122 °F.

Risc de deteriorare din cauza încălzirii prea lungi!

Deconectați cablul de încărcare de la circuit după fiecare proces de încărcare.

Încărcare sigură până la o temperatură ambientală de 45 °C/113 °F.

Informații despre eliminarea dispozitivului și DEEE. Acest aparat electric a fost lansat pentru prima dată după 13 august 2005. În conformitate cu Directiva europeană DEEE și cu reglementările naționale, aparatele electrice și piesele electronice incluse în această livrare nu trebuie eliminate prin gunoii menajer. La sfârșitul duratei de viață a produsului, acestea trebuie aruncate la un punct de colectare municipal pentru a asigura o eliminare ecologică.

Observații privind bateriile / bateriile reîncărcabile

Utilizare în siguranță până la o temperatură ambientală de 50 °C/122 °F.

Risc de deteriorare din cauza încălzirii prea lungi!

Deconectați cablul de încărcare de la circuit după fiecare proces de încărcare.

Încărcare sigură până la o temperatură ambientală de 45 °C/113 °F.



Informații despre eliminarea dispozitivului și DEEE. Acest aparat electric a fost lansat pentru prima dată după 13 august 2005. În conformitate cu Directiva europeană DEEE și cu reglementările naționale, aparatele electrice și piesele electronice incluse în această livrare nu trebuie eliminate prin gunoii menajer. La sfârșitul duratei de viață a produsului, acestea trebuie aruncate la un punct de colectare municipal pentru a asigura o eliminare ecologică.

Observații privind bateriile / bateriile reîncărcabile

În contextul distribuției bateriilor și bateriilor reîncărcabile, în conformitate cu reglementările europene, suntem obligați să vă informăm pe dvs., consumatorul, despre următoarele: Sunteți obligat legal să returnați bateriile și bateriile reîncărcabile. După utilizare, le puteți returna la noi, le puteți duce la un punct de colectare municipal sau le puteți livra gratuit unui dealer local. Bateriile și bateriile reîncărcabile sunt etichetate după cum urmează:



Aceste simboluri înseamnă că bateriile și bateriile reîncărcabile nu pot fi aruncate de dvs., consumatorul, prin gunoii menajer. Bateriile și bateriile reîncărcabile care conțin substanțe nocive sunt etichetate cu unul dintre aceste simboluri. Simbolul constă dintr-un coș cu roți tăiat și simbolul chimic al metalului greu care constituie principalul poluant. În detaliu, simbolurile menționate mai sus înseamnă:

Observații privind bateriile cu litiu/bateriile reîncărcabile

Puteți recunoaște bateriile cu litiu și bateriile reîncărcabile cu litiu prin simbolul chimic Li*. Pe lângă informațiile furnizate mai sus, dorim să subliniem și următoarele: Când aruncați bateriile cu litiu sau bateriile reîncărcabile, le returnându-le la noi, ducându-le la un punct de colectare municipal sau predându-le comercianților locali sau companiilor publice de eliminare a deșeurilor, vă rugăm să vă asigurați că acestea sunt complet descărcate. De asemenea, vă rugăm să acoperiți suprafețele de contact de pe baterie marcate cu „+” și „-” cu bandă adezivă pentru a evita riscul de incendiu.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipzig Platz 18, 10117 Berlin declară prin prezenta că toate dispozitivele electronice sunt conforme cu condițiile relevante ale Directivelor europene aplicabile 2014/30/UE și 2011/65/UE.

Limitarea răspunderii

GESKE Beauty Tech GmbH și/sau comercianții cu amănuntul ai acestora sunt răspunzători pentru daunele cauzate de comportamentul intenționat sau din neglijență gravă al GESKE Beauty Tech GmbH, al unui reprezentant sau al unui agent indirect, în conformitate cu directivele legale. Cu excepția vătămării vieții, a integrității corporale sau a sănătății, precum și a încălcării obligațiilor contractuale esențiale (obligații cardinale), GESKE Beauty Tech GmbH și/sau comercianții cu amănuntul sunt răspunzători numai pentru daunele care pot fi atribuite unui comportament intenționat sau din neglijență gravă. Acest lucru se aplică și daunelor indirecte, în special profiturilor pierdute. În plus, răspunderea față de consumatorii datorată unei garanții asumate, cu excepția cazului de comportament intenționat sau de neglijență gravă, sau în cazul în care există o vătămare a vieții, a integrității corporale sau a sănătății și o încălcare a obligațiilor contractuale esențiale (obligații cardinale) este limitată la daunele tipice, previzibile la încheierea contractului, precum și la nivelul daunelor medii tipice pentru acest contract. Acest lucru se aplică și daunelor indirecte, în special profiturilor pierdute. În ceea ce privește companiile, cu excepția cazurilor de punere în pericol a vieții, a integrității corporale și a sănătății sau a unui comportament intenționat sau din neglijență gravă din partea GESKE Beauty Tech GmbH și/sau a comercianților săi, răspunderea este limitată la daunele tipice, prevăzute la momentul încheierii contractului și, de asemenea, la nivelul daunelor medii tipice ale acestui contract. Acest lucru se aplică și daunelor indirecte, în special profiturilor pierdute. Nu va fi atribuită nicio răspundere pentru daunele cauzate de: Nerespectarea prezentului manual/Utilizarea necorespunzătoare/Modificări neautorizate/Modificări tehnice/Utilizarea de piese de schimb neaprobate/Utilizarea de accesorii neaprobate. Revendicările privind obligațiile de răspundere în temeiul legislației germane privind răspunderea pentru produse rămân neafectate.