

beurer CM 50

RO



RO Aparatul anti-celulită
Instrucțiuni de utilizare

Pachet de livrare

- Aparatul anti-celulită
- Cablu de alimentare
- Prezentele instrucțiuni de utilizare

AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în scop comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Cablul de racordare la rețea al acestui aparat nu poate fi înlocuit. Dacă se deteriorează cablul, aparatul trebuie eliminat ca deșeu.

Explicația simbolurilor

Următoarele simboluri apar în instrucțiunile de utilizare și pe plăcuța de identificare:



AVERTIZARE Indicație de avertizare privind pericolele de accident sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.



ATENȚIE Indicație de siguranță privind posibile defecțiuni ale aparatului/accesoriilor.



Indicație Indicație privind informații importante.



Aparatul prezintă izolație dublă de protecție, respectând prin urmare clasa de protecție 2.



A se utiliza exclusiv în spații închise.

1. Despre celulită

În cazul celulitei este vorba de formarea a mici adâncituri în piele care apar în special în zona coapselor, brațelor superioare și a șezutului. Celulita se formează mai ales la femei, deoarece la acestea fibrele de colagen din țesutul conjunctiv sunt dispuse paralel. În cazul prezenței celulitei, celulele adipoase se extind și presează în sus, cauzând astfel acele adâncituri tipice la suprafața pielii.

Există nenumărate metode de tratament medical și cosmetic pentru prevenire sau reducere, însă niciunul din acestea nu are succes pe toată linia.

În combinație cu mișcare în mod regulat și o alimentație echilibrată, masajele care stimulează circulația sanguină pot duce însă la ameliorarea aspectului pielii.

2. Prezentare

Aparatul anti-celulită vă permite posibilitatea de a efectua masaj care stimulează circulația sanguină în special în cazul celulitei, pielii de portocală și țesutului conjunctiv slab la nivelul picioarelor, brațelor superioare și șezutului.

Motorul se mare putere asigură un masaj de frământare puternic.

Datorită acestei mișcări complexe, țesutul subcutanat este masat, iar circulația sanguină și limfatică este stimulată.

Prin funcția de frământare, aparatul simulează mișcarea mâinilor efectuată la un masaj profesional.

Grație designului ergonomic, aparatul permite utilizarea comodă acasă.

3. Utilizare conform destinației

Acest aparat este conceput pentru masarea părților individuale ale corpului uman. Aparatul este destinat numai **uzului propriu**, nu este indicat în scop medical sau comercial. Masajul oferit de aparat nu poate înlocui însă tratamentul medical. Nu utilizați aparatul de masaj dacă una sau mai multe indicații de avertizare menționate în cele ce urmează sunt aplicabile în cazul dumneavoastră. În cazul în care nu sunteți sigur/-ă dacă aparatul de masaj este potrivit pentru dumneavoastră, vă rugăm să vă consultați medicul.



AVERTIZARE

Nu utilizați aparatul de masaj

- pentru animale,
- dacă zona corpului care urmează să fie masată prezintă modificări patologice sau este vătămată (de exemplu, prolapsul nucleului pulpos, rană deschisă),
- pentru masaj în zona cardiacă în cazul în care beneficiați de un stimulator cardiac și consultați-vă medicul înainte de utilizarea aparatului și în alte regiuni ale corpului,
- în zone de piele și de corp umflate, arse, iritate sau rănite,
- pe răni deschise, capilare, varice, acnee, cuperoză, herpes sau alte afecțiuni dermatologice,
- în timpul gravidității,

- pe față (ochi), pe laringe sau alte zone foarte sensibile ale corpului,
- nu utilizați aparatul pentru masajul picioarelor,
- în timpul somnului,
- după consumarea de medicamente sau alcool (capacitate redusă de percepție!),
- în autovehicul.

Înainte de a utiliza aparatul de masaj, vă recomandăm să vă consultați medicul, în special

- dacă suferiți de o afecțiune gravă sau dacă ați suferit o intervenție chirurgicală la nivelul jumătății superioare a corpului,
- dacă beneficiați de un stimulator cardiac, implanturi sau alte elemente terapeutice auxiliare,
- dacă suferiți de tromboză,
- dacă suferiți de diabet,
- dacă aveți dureri a căror cauză este necunoscută.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijențe a aparatului.

4. Instrucțiuni de siguranță

Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare! Nerespectarea următoarelor indicații poate conduce la vătămări corporale sau daune materiale. Păstrați instrucțiunile de utilizare și prezentați-le și altor utilizatori. Înmânați acest manual o dată cu înstrăinarea aparatului.



AVERTIZARE

Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericolul de asfixiere.

Pericol de electrocutare



AVERTIZARE

Fiind un aparat electric, și acest aparat de masaj se va utiliza cu atenție și precauție pentru a evita pericolul de electrocutare.

Din acest motiv, utilizați aparatul

- doar cu cablul de alimentare livrat și la tensiunea de rețea menționată pe acesta,
- doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile,
- niciodată în timpul unei furtuni.

În cazul defectelor și defecțiunilor de funcționare, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză. Nu trageți de cablul electric sau de aparat pentru a scoate ștecărul din priză. Nu țineți și nu susțineți niciodată aparatul de cablu. Păstrați distanța între cabluri și suprafețele calde. Nu strângeți, îndoiți sau rotiți cablul. Nu îl perforați cu ace sau obiecte ascuțite.

Asigurați-vă că aparatul de masaj, comutatorul, elementul de rețea și cablul nu intră în contact cu apa, aburii sau alte lichide. Prin urmare, utilizați aparatul doar în spații interioare uscate (de exemplu, nu îl utilizați niciodată în cadă, la saună).

Nu băgați niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateți imediat ștecherul din priză. Nu utilizați aparatul dacă acesta sau accesoriile sale prezintă defecte vizibile. Nu expuneți aparatul șocurilor și protejați-l împotriva căderii.

Reparații



AVERTIZARE

- Reparația aparatelor electrice poate fi efectuată numai de către persoane de specialitate. Din cauza reparațiilor necorespunzătoare, utilizatorul se poate expune unor pericole grave. Pentru efectuarea reparațiilor, contactați Serviciul Clienți sau un comerciant autorizat.
- În cazul defectării elementului de rețea sau a conductorului acestuia, piesele menționate trebuie înlocuite de un comerciant autorizat.

Pericol de incendiu



AVERTIZARE

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucțiuni de utilizare poate cauza în anumite condiții apariția pericolului de incendiu!

Din acest motiv, nu utilizați aparatul de masaj

- niciodată acoperit, de exemplu, cu o pătură, pernă, ...
- în apropierea benzinei sau a altor substanțe ușor inflamabile.

Manipulare



ATENȚIE

Aparatul trebuie decuplat și scos din priză după fiecare utilizare și înainte de fiecare operațiune de curățare.

- Trebuie să se evite introducerea obiectelor în orificiile aparatului sau între piesele mobile. Asigurați-vă că piesele mobile se pot mișca întotdeauna liber.
- Protejați aparatul împotriva temperaturilor ridicate.

Eliminarea ca deșeu



ATENȚIE


Respectați dispozițiile locale privind eliminarea materialelor. Vă rugăm să eliminați aparatul conform prevederilor Directivei **2002/96/CE- WEEE** (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorităților locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



5. Descrierea aparatului

Pernă de masaj Shiatsu (latura frontală)

1. Curea de mână reglabilă
2. Comutator glisant cu 3 poziții
0 = oprit
1 = viteză redusă
2 = viteză mare
3. Role de masaj
4. Cablu de alimentare

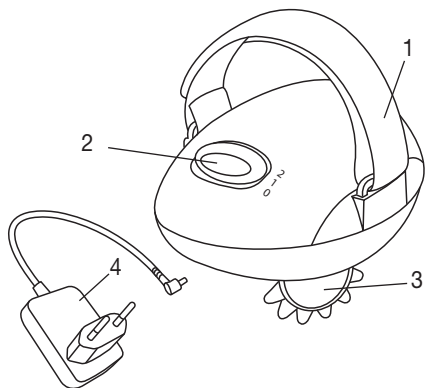

6. Punerea în funcțiune

- Îndepărtați ambalajul.
- Verificați aparatul, cablul de alimentare cu ștecăr și cablurile în vederea identificării defecțiunilor.
- Conectați fișa de legătură la mufa aparatului de masaj.
- Amplasați cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.

7. Utilizare

Presați aparatul de masaj cu atenție pe zona corpului pe care doriți să o masați.

În cazul în care vă provoacă dureri sau o senzație de disconfort, întrerupeți masajul sau schimbați poziția ori presiunea de strângere.

Nu prindeți sau strângeți părți ale corpului, mai ales degete, între rolele de masaj rotative.

Porniți aparatul de masaj folosind tasta comutatorului glisant. Rolele de masaj încep să se rotească. Puteți alege între viteză redusă și viteză mare. Pentru a opri aparatul, aduceți comutatorul glisant în poziția 0.



Indicație

- Folosiți aparatul de masaj timp de maxim 15 de minute. Dacă durata masajului este mai lungă, se pot cauza stimularea excesivă a musculaturii și o stare de tensionare, nu de relaxare.

8. Îngrijire și depozitare

Curățarea



AVERTIZARE

- Înainte de fiecare operațiune de curățare scoateți elementul de rețea din priză și din aparat.
- Curățați aparatul doar conform instrucțiunilor. Se interzice cu desăvârșire pătrunderea de lichide în aparat sau accesorii.
- Rolele de masaj pot fi înlăturate trăgând cu putere de ele. Elementul cu role poate fi curățat sub jet de apă cu o perie moale și puțin detergent. Aparatul poate fi curățat cu o cârpă moale, puțin umezită.
- Utilizați din nou aparatul doar atunci când acesta este complet uscat.

Păstrare

Dacă nu utilizați aparatul un timp mai îndelungat, vă recomandăm să îl păstrați în ambalajul original într-un mediu uscat și fără să fie exercitată presiune la nivelul acestuia.

